


IFU Nr. 25-D

请注意：本医疗产品仅允许由经过培训的医务人员获取和使用。

- 1. 产品描述
2. 产品型号/规格
3. 组成和包装
4. 预期用途
5. 适应症
6. 禁忌症
7. 可能的副作用
8. 使用说明

8.2.2. 向下按把手，直到其完全到位。

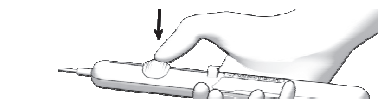

8.2.3. 在按下的状态下，拉动把手直到其卡住，并保持在此位置。







注意！



- 9. 可能出现的并发症和/或风险
10. 警告/注意事项

- 11. 与其他药物的相互作用
12. 有效期和运输、储存条件
13. 处理方式
14. 注册人/售后服务单位: Urotech GmbH

8.2.1. 取下保护盖... 用无菌镊子或镊子夹住手柄上的小孔，取下保护盖。

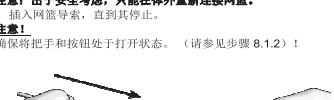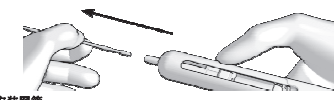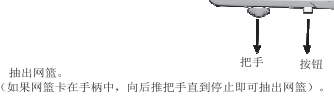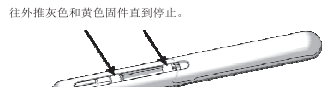

Please note: This medical product may be obtained and used only by trained medical personnel.

- 1. Description
2. Contents and packaging
3. Intended use
4. Indications
5. Contraindications
6. Possible side effects
7. Instructions


7.2.2. Push the slider down until it comes to a stop.



7.2.3. In the pressed state, pull the slider until it catches and hold in position.

Attention!

Hold the slider in this position!

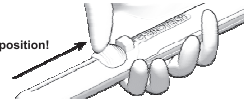

7.2.4. At the same time, push down the gray push button.




The stone basket is inserted into the target organ using the uretero-roscope. By withdrawing the tube covering, the basket is released at the tip of the instrument and unfolds.


In the event that the instrument gets stuck in the ureter, it is possible to release the handle from the basket and withdraw the endoscope, thereby unblocking the working channel.

7.1. Releasing the basket

- 7.1.1. Remove the protective cover
7.1.2. Push the gray and yellow fixation until the stop.

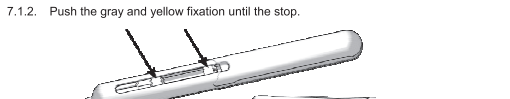

7.1.3. Withdraw basket. (Should the basket get caught in the detachable handle, it can be released by pushing back with the pusher up to the stop).

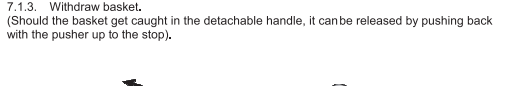


- 7.2. Fixing the basket in place
7.2.1. Insert the basket wire until it comes to a stop.

Note: For safety, only reconnect the basket outside of the body. Ensure that the slider and push button are opened until the stop.

- 7.2.1. Insert the basket wire until it comes to a stop.


Attention! Ensure that the slider and push button are opened until the stop.

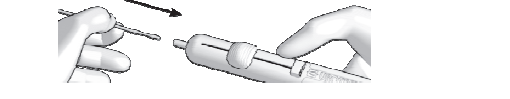

ご注意：この医療製品は、訓練を受けた医療従事者のみにより入手、ご使用いただけます。

- 1. 概要
2. 内容と包装
3. 使用目的
4. 適応症
5. 禁忌症
6. 可能な副作用
7. 説明


7.2.2. スライダは止まるまで押し下げます。

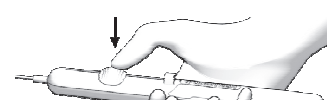

7.2.3. 押したままの状態でも、所定の位置になるまでスライダを引っ張ります。

注意！

スライダはこの位置に保持してください！

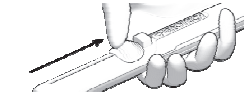


7.2.4. 同時にグレーの押しボタンを押します。



結石用バスケットは、尿管腎鏡を使用して標的臓器に挿入します。チューブのカバーを外し、バスケットを器具の先端でリリースして開きます。

7.1. バスケットのリリース
7.1.1. 保護カバーを取り外します。

- 7.1.2. グレーと黄色の固定具をストップ位置まで押しします。

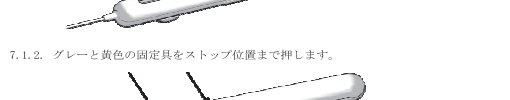

7.1.3. バスケットを引き出します。



7.2.1. バスケットを所定の位置に固定
7.2.2. バスケットを所定の位置に固定

注意：安全を期すため、バスケットは体外でのみ再接続してください。

7.2.1. バスケットワイヤーは止まるまで挿入します。

注意！ スライダと押しボタンはストップ位置まで開いてください。

