




**UROVISION·UROTECH**

A MEDI-GLOBE COMPANY

# Kinderurologie Produktkatalog

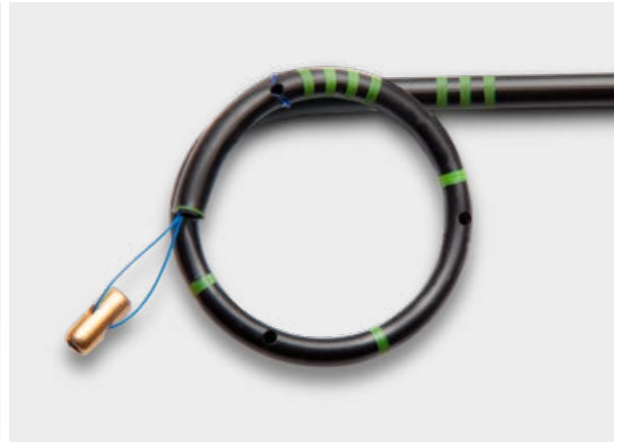

Ihr Partner für die  
Endourologie –  
WIR sind URO

## ALLES FÜR DIE KINDERUROLOGIE

Es gibt viele Gründe, warum bei Kindern und Jugendlichen urologische Untersuchungen und Eingriffe notwendig sind. Rezidivierende Harnwegsinfekte, Fehlbildungen im Urogenitaltrakt, Hypospadie oder onkologische Erkrankungen des Urogenitaltraktes sind nur einige Indikationen, die Interventionen nötig machen. In der Gesamtheit sind urologische Erkrankungen im Kindesalter nicht selten.

Als einer der führenden Hersteller von Einmalprodukten für endoskopische und endourologische Interventionen, führen wir daher auch ein spezielles Sortiment, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Kinderurologie. Wir bieten Standardprodukte sowie speziell entwickelte, innovative endourologische Produkte zur Unterstützung der Therapie an.

UROTECH/UROVISION – Ihr Partner in der Endourologie. Mit innovativen Lösungen, die Eingriffe erleichtern und den Kindern soweit wie möglich Unwohlsein und Schmerzen ersparen.


WIR SIND URO!



## INHALTE



STEINFANGKÖRBCHEN  
TIPLESS  
Seite 4

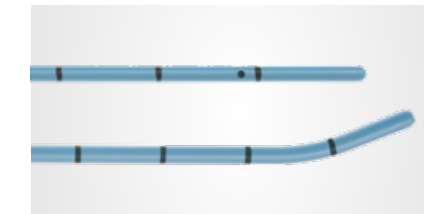

URETERKATHETER  
Seite 5



URETERSCHIENEN  
Seite 6



NEPHROSTOMIE  
Seite 16




SUPRAPUBISCHE  
BLASENDRAINAGE  
Seite 20



TRANSURETHRALE  
BLASENDRAINAGE  
Seite 24



SPEZIALPRODUKTE  
Seite 26

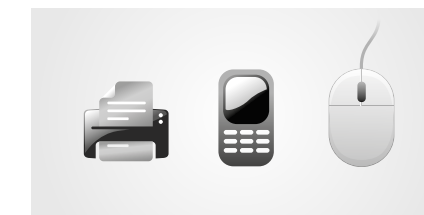

BESTELLINFORMATIONEN  
Rückseite


## STEINFANGKÖRBCHEN TIPLESS

### STEINFANGKÖRBCHEN


Superelastisch durch Nitinolmaterial

#### Wechselgriff nach Lahme für alle Steinfangkörbchen

- De- und rekonnektierbarer Griff: Endoskop kann nach Dekonnektion bei liegendem Körbchen entfernt und der Griff anschließend wieder konnektiert werden
- Automatische Fixierung des Steins im Körbchen durch Federmechanismus
- Ergonomisches Griffdesign mit rutschfester Oberfläche
- Körbchen öffnet und schließt sich im Sichtfeld: kein Nachkorrigieren des Endoskops notwendig

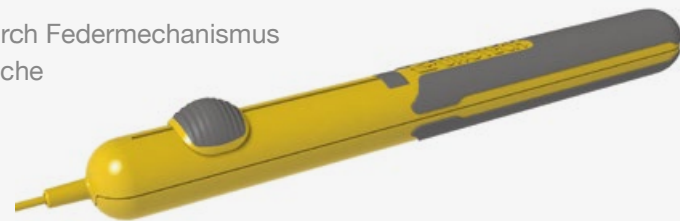

#### „TIPLESS“

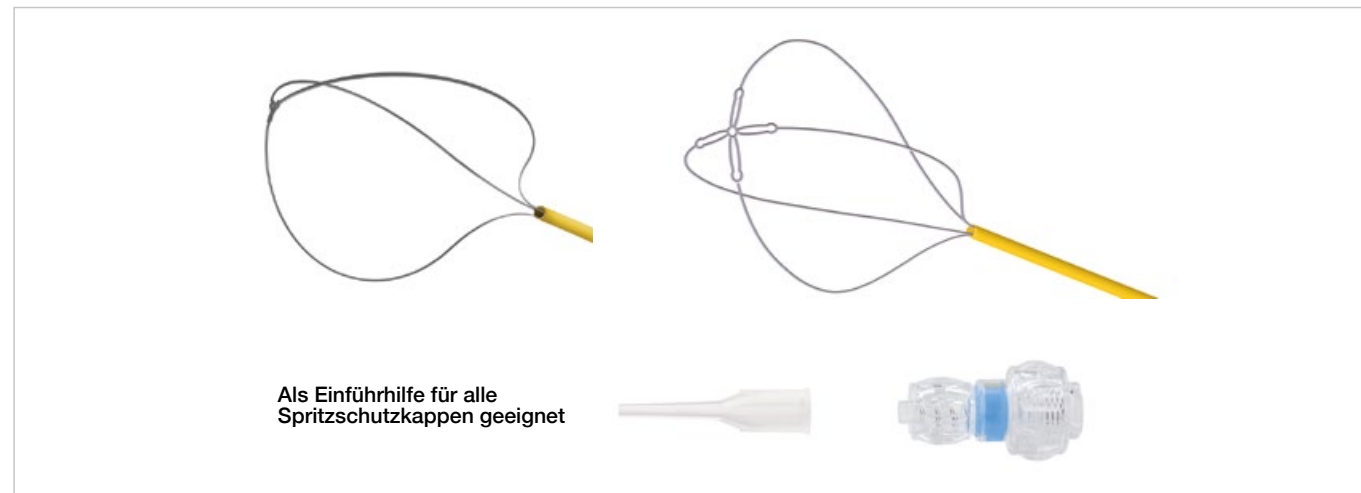

- „Kleinstes Körbchen der Welt“ mit 1,2 FR/CH
- Beste Spülstromeigenschaften und Sichtverhältnisse
- Zum Aufgreifen kleinster Steinkonkremente auch am Geweberand
- Mit Tuohy Borst Adapter zur Fixierung am Arbeitskanal des Endoskops
- Einführhilfe schützt die Körbchenspitze bei der Einführung ins Endoskop


Bestellnummer	Größe (FR/CH)	Drähte	Arbeitslänge (cm)	Körbchenlänge (mm)	Körbchen Ø (mm)	Körbchenform
STN-T123-120	1,2	3	120	12	8	gerade
STN-T184-120	1,8	4	120	15	11	gerade

Verpackungseinheit = 3 Stück

## URETERKATHETER

### URETERKATHETER

Zur retrograden Urographie

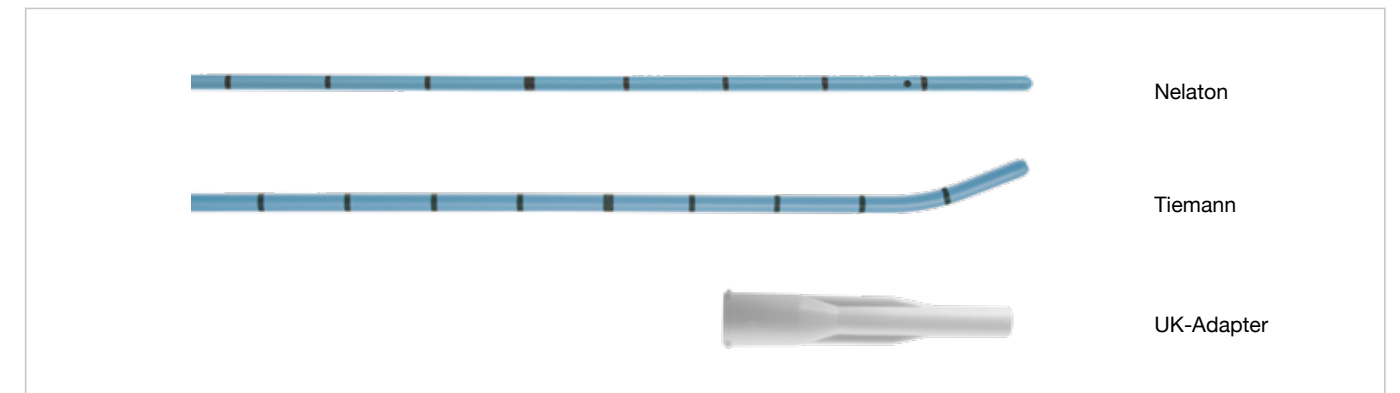

- Mit Universaladapter zur Injektion von Kontrastmittel
- Gute Röntgensichtbarkeit
- Mit innenliegendem Mandrin aus Edelstahl

#### Nelaton-Spitze

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer geschlossene Spitze	Bestellnummer offene Spitze	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Maximaler Draht ø (inch)
UK-500370	UK-600370	3	70	0,025"
UK-500470	UK-600470	4	70	0,035"

#### Tiemann-Spitze

Verpackungseinheit = 10 Stück


Bestellnummer geschlossene Spitze	Bestellnummer offene Spitze	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Maximaler Draht ø (inch)
UK-510370	UK-540370	3	70	0,025"
UK-510470	UK-540470	4	70	0,035"

## URETERSCHIENEN

### YELLOW-STAR Double-J Ureterschienen-Set PC-behandelt



#### SET-KOMPONENTEN

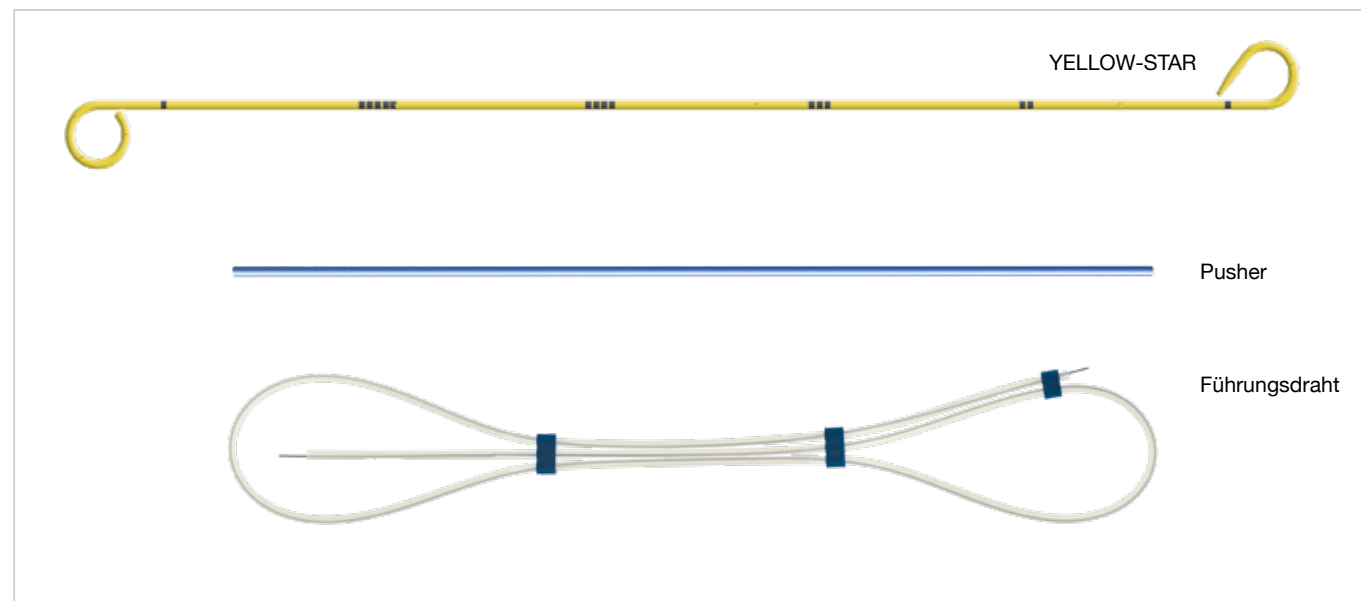

#### Ureterschiene

- ◆ Polyurethan (PUR)
- ◆ PC-Behandlung zur Verringerung des Risikos von Infektionen und Inkrustationen
- ◆ Drainageöffnungen in den Pigtails und im Schaft
- ◆ Offene Spitze
- ◆ Markierungen zur exakten Positionierung
- ◆ Röntgensichtbar

#### Pusher

- ◆ Länge: 40 cm

#### Führungsdraht standard

- ◆ PTFE-beschichtet

## URETERSCHIENEN

#### Offene Spitze

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer ohne Führungsdraht	Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
EP-414710	EP-364710	4,7	10	125	0,028"	gerade	standard
EP-414712	EP-364712	4,7	12	125	0,028"	gerade	standard
EP-414715	EP-364715	4,7	15	125	0,028"	gerade	standard
EP-414718	EP-364718	4,7	18	125	0,028"	gerade	standard
EP-414720	EP-364720	4,7	20	125	0,028"	gerade	standard
EP-414722	EP-364722	4,7	22	125	0,028"	gerade	standard

#### Führungsdraht standard – PTFE-beschichteter Edelstahl

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft
ST-291528	0,028"	150	gerade	standard	standard

#### UROLIX Führungsdraht "hydrophil"

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft
UXN-SS-2515	0,025"	150	gerade	standard	standard

#### Platin Pusher

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer	Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Maximaler Führungsdraht Ø
PU-0545-RM	5	45	0,028"
PU-0570-RM	5	70	0,028"


URETERSCHIENEN

**PREMIUM YELLOW STAR PLATIN PUSHER-LINIE**

Für die optisch gesicherte Platzierung der Ureterschiene



**SET-KOMPONENTEN**

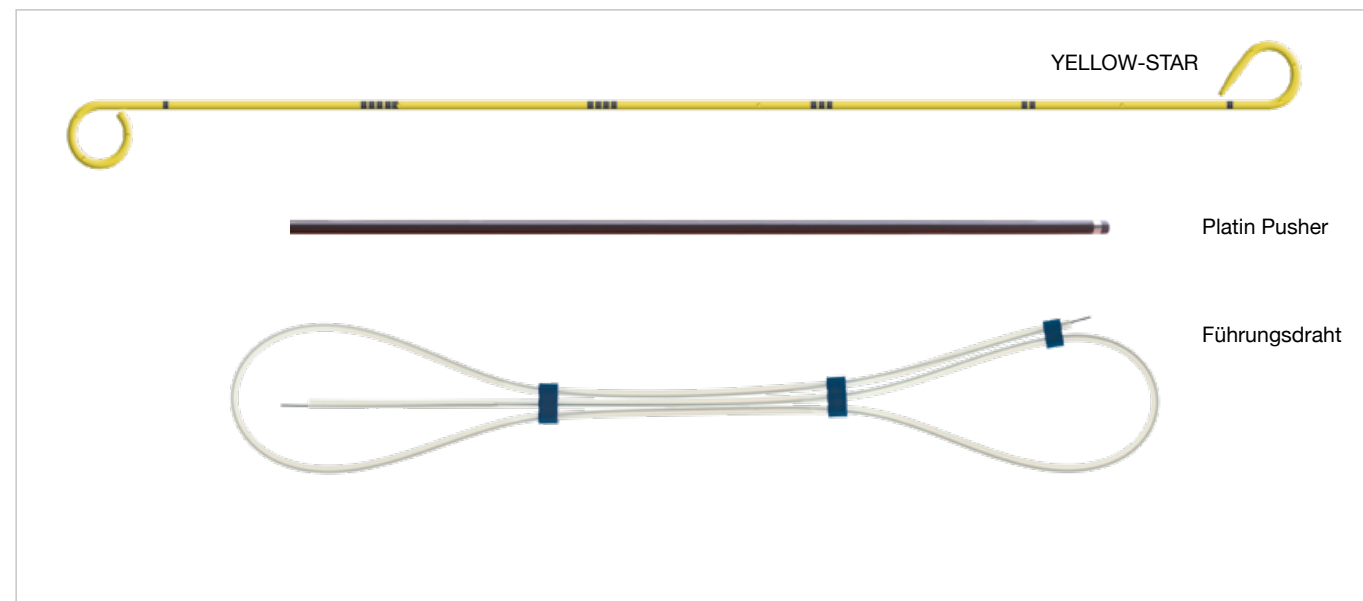

**Ureterschiene**

- ◆ Polyurethan (PUR)
- ◆ PC-Behandlung zur Verringerung des Risikos von Infektionen und Inkrustationen
- ◆ Drainageöffnungen in den Pigtails und im Schaft
- ◆ Offene Spitze
- ◆ Markierungen zur exakten Positionierung
- ◆ Röntgensichtbar

**Platin Pusher**

- ◆ Verbesserte Röntgensichtbarkeit durch Platinring an der Spitze
- ◆ Erhöhte Sicherheit bei der retrograden Einlage in die Blase

**Führungsdraht standard**

- ◆ PTFE-beschichtet

URETERSCHIENEN

**Offene Spitze**

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer ohne Führungsdraht	Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
-	YSPL-364708	4,7	8	125	0,028"	gerade	standard
YSPL-414710	YSPL-364710	4,7	10	125	0,028"	gerade	standard
-	YSPL-364710-F	4,7	10	125	0,028"	gerade	standard
YSPL-414712	YSPL-364712	4,7	12	125	0,028"	gerade	standard
-	YSPL-364712-F	4,7	12	125	0,028"	gerade	standard
YSPL-414715	YSPL-364715	4,7	15	125	0,028"	gerade	standard
YSPL-414715-F	YSPL-364715-F	4,7	15	125	0,028"	gerade	standard
YSPL-414718	YSPL-364718	4,7	18	125	0,028"	gerade	standard
YSPL-414718-F	YSPL-364718-F	4,7	18	125	0,028"	gerade	standard
YSPL-414720	YSPL-364720	4,7	20	125	0,028"	gerade	standard
YSPL-414720-F	YSPL-364720-F	4,7	20	125	0,028"	gerade	standard
YSPL-414722	YSPL-364722	4,7	22	125	0,028"	gerade	standard
YSPL-414722-F	YSPL-364722-F	4,7	22	125	0,028"	gerade	standard

**Führungsdraht standard – PTFE-beschichteter Edelstahl**

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft
ST-291528	0,028"	150	gerade	standard	standard

**UROLIX Führungsdraht "hydrophil"**

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft
UXN-SS-2515	0,025"	150	gerade	standard	standard

**Platin Pusher**

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer	Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Maximaler Führungsdraht Ø
PU-0545-RM	5	45	0,028"
PU-0570-RM	5	70	0,028"


Varianten „-F“ sind mit Faden



## URETERSCHIENEN

### WHITE-STAR Double-J Ureterschienen-Set VISIOSTAR steuerbare Set-Variante

#### SET-KOMPONENTEN

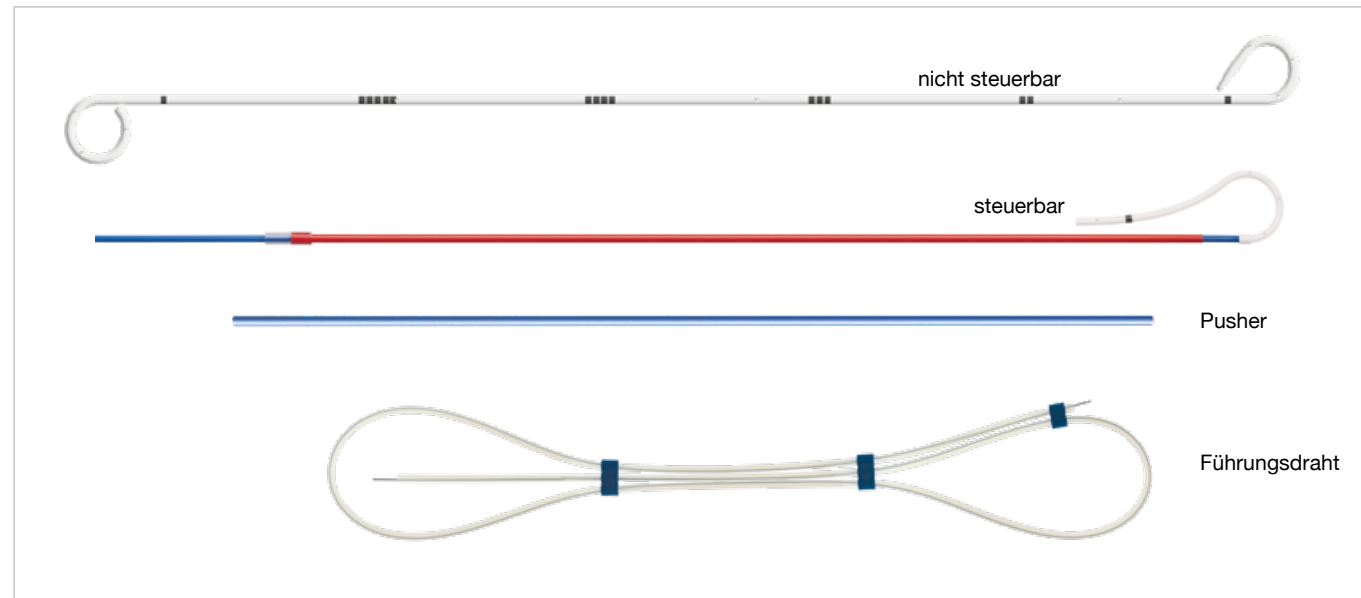

#### Ureterschiene

- ♦ Polyurethan (PUR)
- ♦ Drainageöffnungen in den Pigtails und im Schaft
- ♦ Offene Spitze
- ♦ Markierungen zur exakten Positionierung
- ♦ Röntgensichtbar

#### Pusher

- ♦ Länge: 40 cm

#### Führungsdraht standard

- ♦ PTFE-beschichtet

#### VISIOSTAR Steuerung

- ♦ Katheter kann leicht gedreht und nach oben bzw. unten bewegt werden
- ♦ Sichere Positionierung der Ureterschiene
- ♦ Vormontiertes Komplettsset

## URETERSCHIENEN

### Offene Spitze nicht steuerbar

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer ohne Führungsdraht	Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
ST-197308	ST-190308	3	8	150	0,018"	gerade	standard
ST-197310	ST-190310	3	10	150	0,018"	gerade	standard
ST-197312	ST-190312	3	12	150	0,018"	gerade	standard
ST-197315	ST-190315	3	15	150	0,018"	gerade	standard
ST-197318	ST-190318	3	18	150	0,018"	gerade	standard
ST-197320	ST-190320	3	20	150	0,018"	gerade	standard
-	ST-190322	3	22	150	0,018"	gerade	standard
EN-410408	EN-360408	4	08	125	0,025"	gerade	standard
EN-410410	EN-360410	4	10	125	0,025"	gerade	standard
EN-410412	EN-360412	4	12	125	0,025"	gerade	standard
EN-410415	EN-360415	4	15	125	0,025"	gerade	standard
EN-410418	EN-360418	4	18	125	0,025"	gerade	standard
EN-410420	EN-360420	4	20	125	0,025"	gerade	standard
-	EN-360422	4	22	125	0,025"	gerade	standard
EN-410508	-	4,7	8	125	0,028"	gerade	standard
EN-410510	EN-360510	4,7	10	125	0,028"	gerade	standard
EN-410512	EN-360512	4,7	12	125	0,028"	gerade	standard
EN-410515	EN-360515	4,7	15	125	0,028"	gerade	standard
EN-410518	EN-360518	4,7	18	125	0,028"	gerade	standard
EN-410520	EN-360520	4,7	20	125	0,028"	gerade	standard
EN-410522	EN-360522	4,7	22	125	0,028"	gerade	standard

### Offene Spitze steuerbar

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
US-110508	4,7	8	150	0,028"	gerade	standard
US-110510	4,7	10	150	0,028"	gerade	standard
US-110512	4,7	12	150	0,028"	gerade	standard
US-110515	4,7	15	150	0,028"	gerade	standard
US-110518	4,7	18	150	0,028"	gerade	standard
US-110520	4,7	20	150	0,028"	gerade	standard
US-110522	4,7	22	150	0,028"	gerade	standard

### Führungsdraht standard – PTFE-beschichteter Edelstahl

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft
ST-291518	0,018"	150	gerade	standard	standard
ST-291528	0,028"	150	gerade	standard	standard


### UROLIX Führungsdraht "hydrophil"

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer	Durchmesser (inch)	Länge (cm)	Spitze	Härtegrad Spitze	Härtegrad Schaft
UXN-SS-2515	0,025"	150	gerade	standard	standard

## URETERSCHIENEN

**MAGNETIC BLACK-STAR® Double-J Ureterschiennen-Set und Retrieval Device mit Magnet**

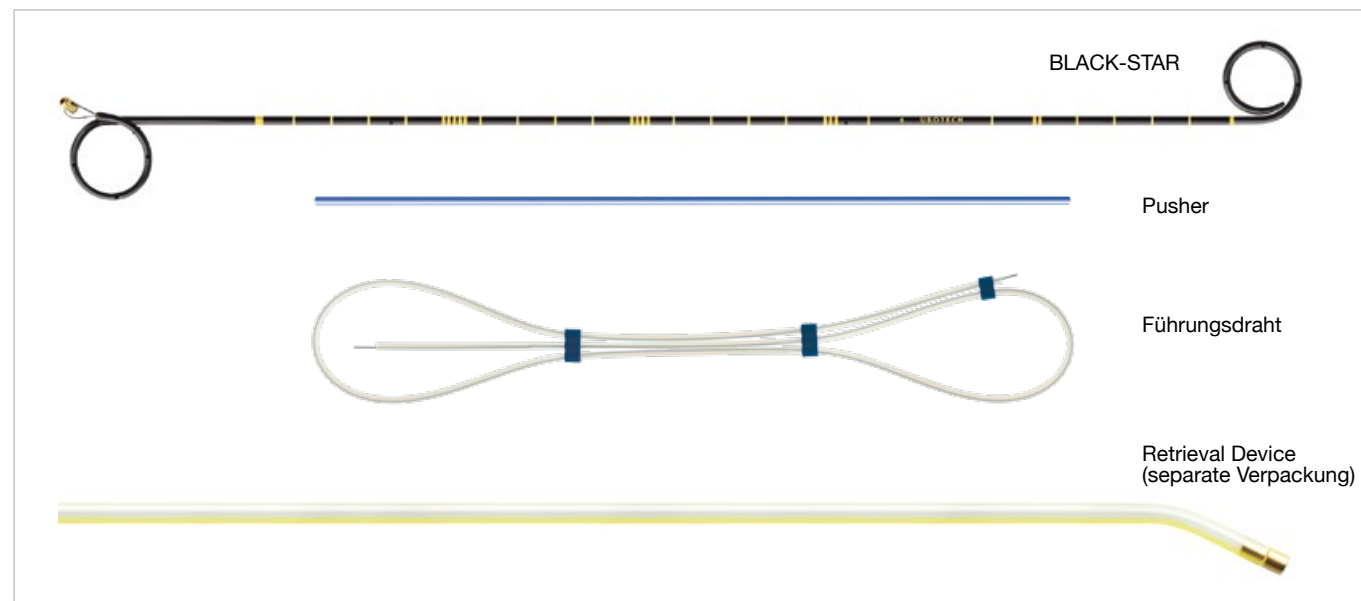**SET-KOMPONENTEN**

**Ureterschiene**

- ◆ Polyurethan (PUR)
- ◆ Drainageöffnungen in den Pigtails und im Schaft
- ◆ Offene Spitze
- ◆ Markierungen zur exakten Positionierung
- ◆ Röntgensichtbar
- ◆ Blasenseitiger Magnet Größe S - FR/CH7
- ◆ Keine erneute Zystoskopie/Narkose zur Entfernung des Magnetic Black-Star nötig


**Pusher**


- ◆ Länge: 40 cm

**Führungsdraht standard**

- ◆ PTFE-beschichtet

**Retrieval Device mit Magnet**

- ◆ Weiches PUR
- ◆ Einfache Spitzenorientierung durch Längsmarkierung
- ◆ Tiemannspitze, 30°

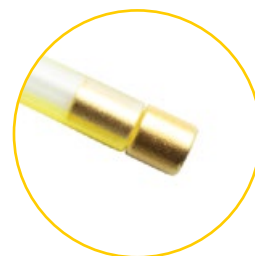

## URETERSCHIENEN

**Offene Spitze mit Retrieval Device**

Verpackungseinheit = 1 Stück

Bestellnummer ohne Führungsdraht	Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Größe Stentmagnet (FR/CH)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
MR-414810	MR-364810	4,8	10	7	145	0,028"	gerade	standard
MR-414812	MR-364812	4,8	12	7	145	0,028"	gerade	standard
MR-414815	MR-364815	4,8	15	7	145	0,028"	gerade	standard
MR-414818	MR-364818	4,8	18	7	145	0,028"	gerade	standard
MR-414820	MR-364820	4,8	20	7	145	0,028"	gerade	standard
MR-414822	MR-364822	4,8	22	7	145	0,028"	gerade	standard

**Offene Spitze ohne Retrieval Device**

Verpackungseinheit = 1 Stück

Bestellnummer ohne Führungsdraht	Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Größe Stentmagnet (FR/CH)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
MR-404810	MR-304810	4,8	10	7	145	0,028"	gerade	standard
MR-404812	MR-304812	4,8	12	7	145	0,028"	gerade	standard
MR-404815	MR-304815	4,8	15	7	145	0,028"	gerade	standard
MR-404818	MR-304818	4,8	18	7	145	0,028"	gerade	standard
MR-404820	MR-304820	4,8	20	7	145	0,028"	gerade	standard
MR-404822	MR-304822	4,8	22	7	145	0,028"	gerade	standard

**Retrieval Device**

Verpackungseinheit = 1 Stück


Bestellnummer geeignet für FR/CH	Größe (FR/CH)	Länge (cm)
R-Device-S	9	40

## URETERSCHIENEN


**MAGNETIC BLACK-STAR® XS**  
 und Retrieval Device mit Magnet

**NEU!**


## SET-KOMPONENTEN

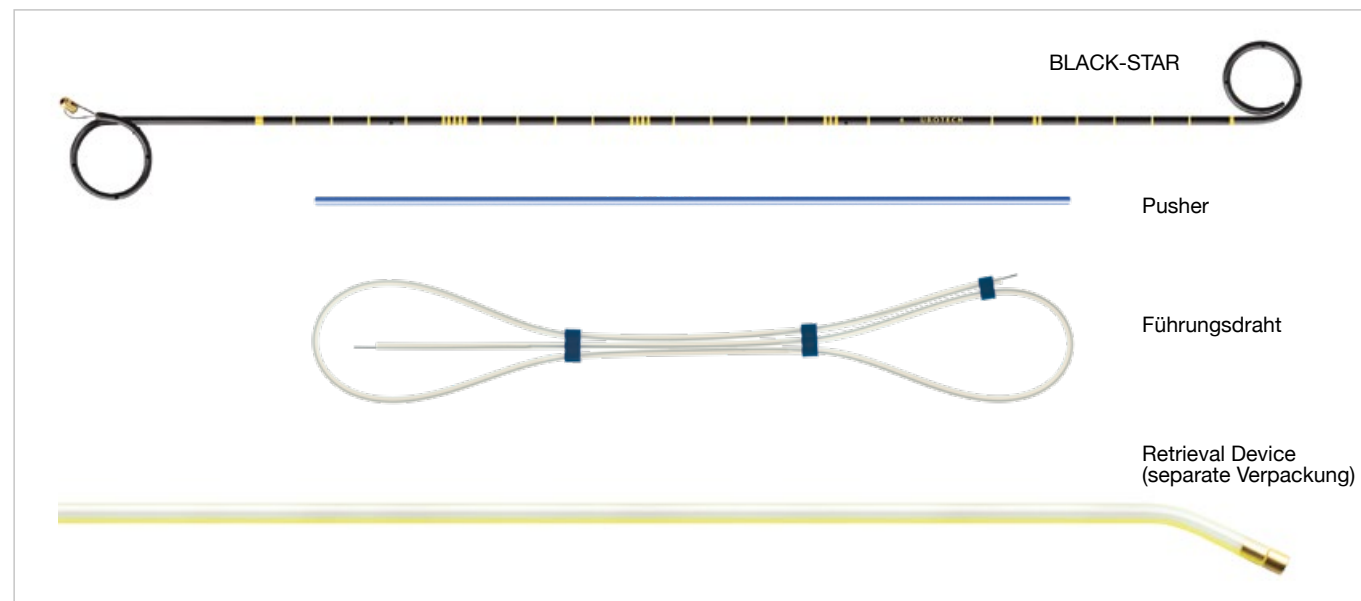
**Ureterschiene**

- ◆ Polyurethan (PUR)
- ◆ Drainageöffnungen in den Pigtails und im Schaft
- ◆ Offene Spitze
- ◆ Markierungen zur exakten Positionierung
- ◆ Röntgensichtbar
- ◆ Blasenseitiger Magnet Größe XS - FR/CH 4,8
- ◆ Verwendbar mit Zysto-/Urethroskopen ab einem Arbeitskanal von CH/FR 6
- ◆ Keine erneute Zystoskopie/Narkose zur Entfernung des Magnetic Black-Star XS nötig

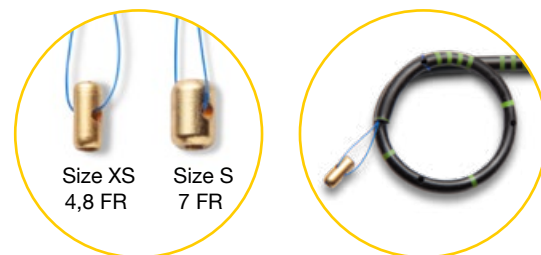
**Pusher**

- ◆ Länge: 40 cm

**Führungsdraht standard**

- ◆ PTFE-beschichtet

**Retrieval Device mit Magnet**

- ◆ Weiches PUR
- ◆ Einfache Spitzenorientierung durch Längsmarkierung
- ◆ Tiemannspitze, 30°



## URETERSCHIENEN

**Offene Spitze mit Retrieval Device**

Verpackungseinheit = 1 Stück

Bestellnummer ohne Führungsdraht	Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Größe Stentmagnet (FR/CH)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
MR-414810-XS	MR-364810-XS	4,8	10	4,8	145	0,028"	gerade	standard
MR-414812-XS	MR-364812-XS	4,8	12	4,8	145	0,028"	gerade	standard
MR-414815-XS	MR-364815-XS	4,8	15	4,8	145	0,028"	gerade	standard
MR-414818-XS	MR-364818-XS	4,8	18	4,8	145	0,028"	gerade	standard
MR-414820-XS	MR-364820-XS	4,8	20	4,8	145	0,028"	gerade	standard
MR-414822-XS	MR-364822-XS	4,8	22	4,8	145	0,028"	gerade	standard

**Offene Spitze ohne Retrieval Device**

Verpackungseinheit = 1 Stück

Bestellnummer ohne Führungsdraht	Bestellnummer mit Führungsdraht	Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Größe Stentmagnet (FR/CH)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
MR-404810-XS	MR-304810-XS	4,8	10	4,8	145	0,028"	gerade	standard
MR-404812-XS	MR-304812-XS	4,8	12	4,8	145	0,028"	gerade	standard
MR-404815-XS	MR-304815-XS	4,8	15	4,8	145	0,028"	gerade	standard
MR-404818-XS	MR-304818-XS	4,8	18	4,8	145	0,028"	gerade	standard
MR-404820-XS	MR-304820-XS	4,8	20	4,8	145	0,028"	gerade	standard
MR-404822-XS	MR-304822-XS	4,8	22	4,8	145	0,028"	gerade	standard

**Retrieval Device**

Verpackungseinheit = 1 Stück

Bestellnummer geeignet für FR/CH	Größe (FR/CH)	Länge (cm)
R-Device-S	9	40

**Hinweis:**


Bei endoskopischer Einlage des Magnetic Black Star ist auf den Arbeitskanal des genutzten Endoskops zu achten. Dieser sollte mind. 1 FR/CH größer als die Ureterschiene sein.



## NEPHROSTOMIE

**RENODRAIN-YELLOW** Nephrostomie Punktions- und Wechselset  
 Seldinger-Technik, PC-behandelt, mit Pigtail


## SET-KOMPONENTEN

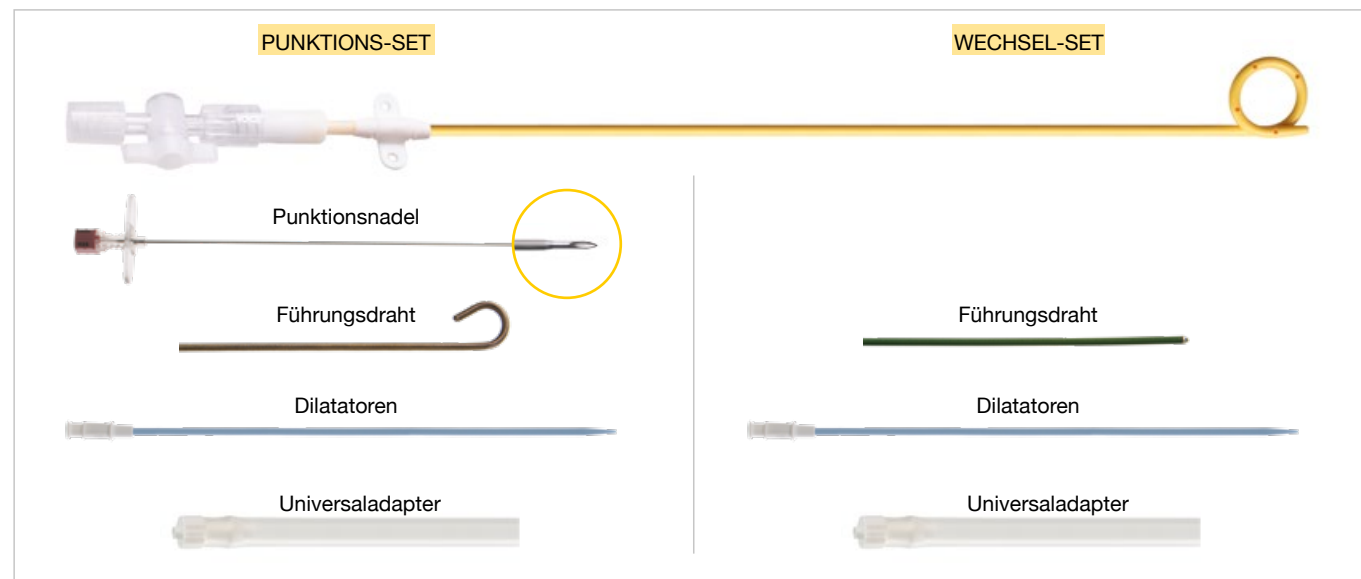
**Nephrostomiekatheter**

- ◆ Polyurethan (PUR)
- ◆ PC-Behandlung zur Verringerung des Risikos von Infektionen und Inkrustationen
- ◆ Drainageöffnungen im Pigtail
- ◆ Luer-Lock-Anschluss


**Punktionsnadel**

- ◆ 2-teilige Nadel mit Facettenschliff
- ◆ Medizinischer Edelstahl
- ◆ 18 G, 20 cm Länge
- ◆ Verbesserte Ultraschallsichtbarkeit durch sandgestrahlte Spitze

**Lunderquist Führungsdraht**

- ◆ PTFE-beschichteter Führungsdraht im Punktions-Set mit flexibler 1,5mm J-Tip Spitze
- ◆ PTFE-beschichteter Führungsdraht im Wechselset mit flexibler gerader Spitze

**Universaladapter**

- ◆ Luer-Lock-Anschluss männlich
- ◆ 10 cm Silikonschlauch zum Anschluss eines Urinbeutels
- ◆ PVC frei

## NEPHROSTOMIE

Einzelkatheter		Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer Einzelkatheter	Größe (FR/CH)	Länge (cm)
RP-410640-K	6	24

Punktions-Set								Verpackungseinheit = 5 Stück
Bestellnummer Punktions-Set	Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Dilatatoren (FR/CH)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze (r=1.5 mm)	Draht-Härtegrad	
RP-400640-K	6	24	5/6	70	0,025"	J-Tip	hart	


Wechsel-Set								Verpackungseinheit = 5 Stück
Bestellnummer Wechsel-Set	Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Dilatatoren (FR/CH)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad	
RP-400642-K	6	24	5/6	70	0,025"	gerade	hart	

NEPHROSTOMIE

**RENODRAIN-INTEGRALE**


Nephrostomie Punktions- und Wechselset, Seldinger-Technik

SET-KOMPONENTEN

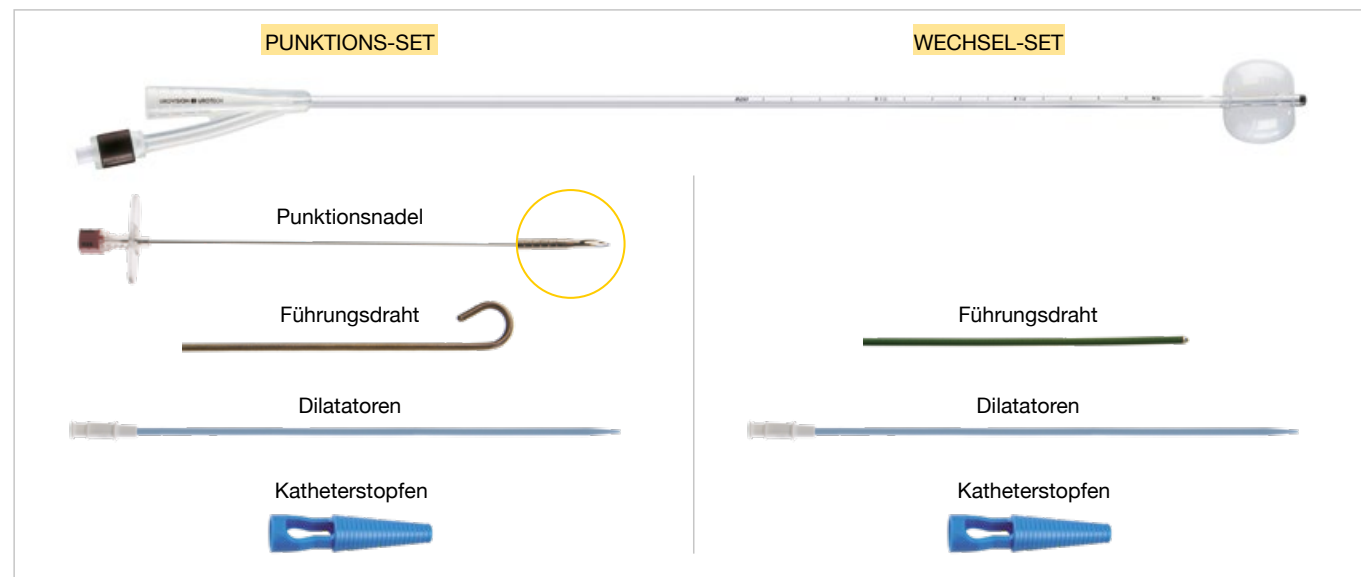

**Ballonkatheter**

- 100 % Vollsilkonkatheter mit integriertem Ballon
- Öffnung hinter dem Ballon zur Kelchdrainage
- Röntgenkontraststreifen
- Markierungen zur exakten Positionierung
- Verstärkter Trichteransatz für sicheres Konnektieren des Urinbeutels

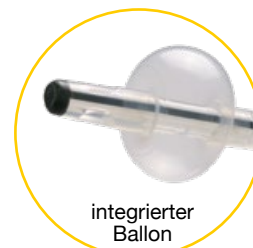

**Punktionsnadel**

- 2-teilige Nadel mit Facettenschliff
- Medizinischer Edelstahl
- 18 G, 20 cm Länge
- Verbesserte Ultraschallsichtbarkeit durch sandgestrahlte Spitze

**Lunderquist Führungsdraht**

- PTFE-beschichteter Führungsdraht im Punktions-Set mit flexibler 1,5mm J-Tip Spitze
- PTFE-beschichteter Führungsdraht im Wechselset mit flexibler gerader Spitze

NEPHROSTOMIE

Einzelkatheter			
Verpackungseinheit = 10 Stück			
Bestellnummer Ballonkatheter	Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Ballon (ml)
RN-431026	10	30	1,5
RN-421040	10	40	1,5

Punktions-Set								
Verpackungseinheit = 5 Stück								
Bestellnummer Punktions-Set	Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Ballon (ml)	Dilatatoren (FR/CH) *mit Spaltschaft	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser	Drahtspitze (r=1.5 mm)	Draht-Härtegrad
RN-401040	10	40	1,5	6/8/10/12*	70	0,035"	J-Tip	hart

Wechsel-Set									
Verpackungseinheit = 5 Stück									
Bestellnummer Wechsel-Set	Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Ballon (ml)	Dilatatoren (FR/CH) *mit Spaltschaft	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser	Drahtspitze	Draht-Härtegrad	
RN-411040	10	40	1,5	6/8/10/12*	70	0,035"	gerade	hart	

Blockungsspritze			
VE = 200 Stück			
Bestellnummer	Kapazität (ml)	PZN	Hilfsmittel-Nr.
SP-2100-10	10	03049455	15.99.99.0006


- Aqua-Dest.-Glycerin-Gemisch 10%



## SUPRAPUBISCHE BLASENDRAINAGE

**SUPRA-FIX** Punktions- und Wechsel-Set  
 Mit Pigtail, mit Trichter

## SET-KOMPONENTEN

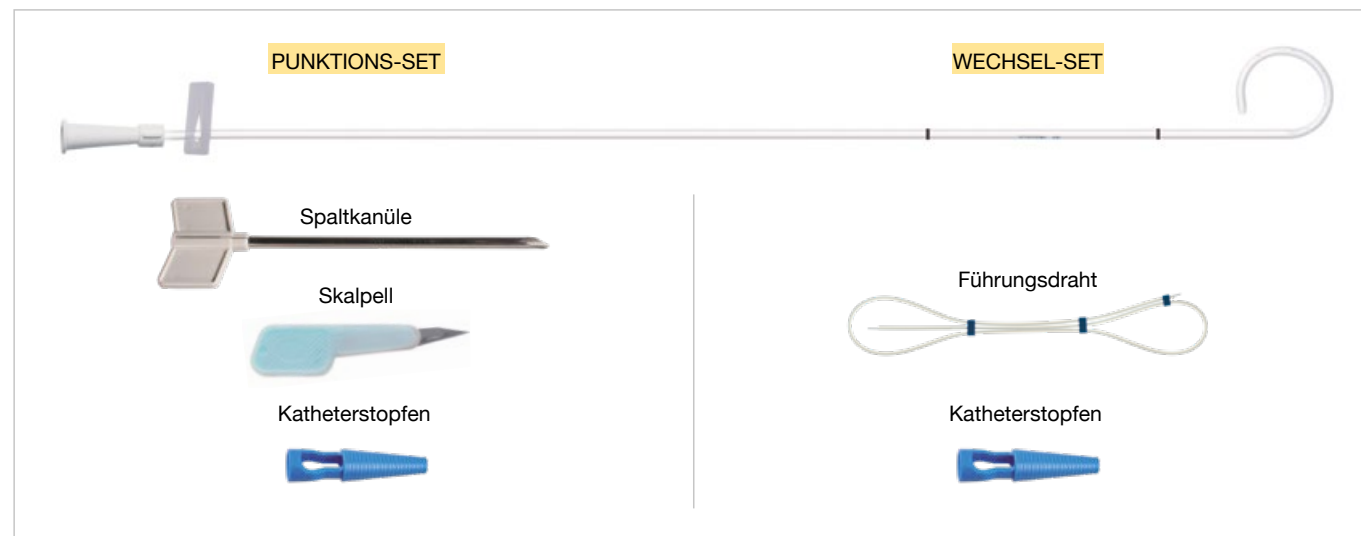
**Pigtailkatheter**

- ◆ Polyurethan (PUR)
- ◆ Flexibler Pigtail verhindert Irritationen
- ◆ Trichter zum Anschluss eines Urinbeutels
- ◆ Zwei Markierungen zur exakten Positionierung

**Spaltkanüle**

- ◆ Medizinischer Edelstahl
- ◆ Einfaches und sicheres Aufbrechen

**Führungsdraht standard (nur im Wechsel-Set)**

- ◆ PTFE-beschichtet

## SUPRAPUBISCHE BLASENDRAINAGE

<b>Punktions-Set</b>				Verpackungseinheit = 5 Stück	
Bestellnummer	Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Spaltkanüle Größe Ø (mm)	Spaltkanüle Länge (cm)	
SU-081030	8,0	30	3,6	8	
SU-081050	8,0	50	3,6	8	


<b>Wechsel-Set</b>						Verpackungseinheit = 5 Stück	
Bestellnummer	Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser (inch)	Drahtspitze	Draht-Härtegrad	
SU-081051	8,0	50	100	0,038"	gerade	standard	

SUPRAPUBISCHE BLASENDRAINAGE

**SUPRAVISION INTEGRAL STANDARD**


Suprapubische Punktions- und Wechselsets, Seldinger-Technik

SET-KOMPONENTEN

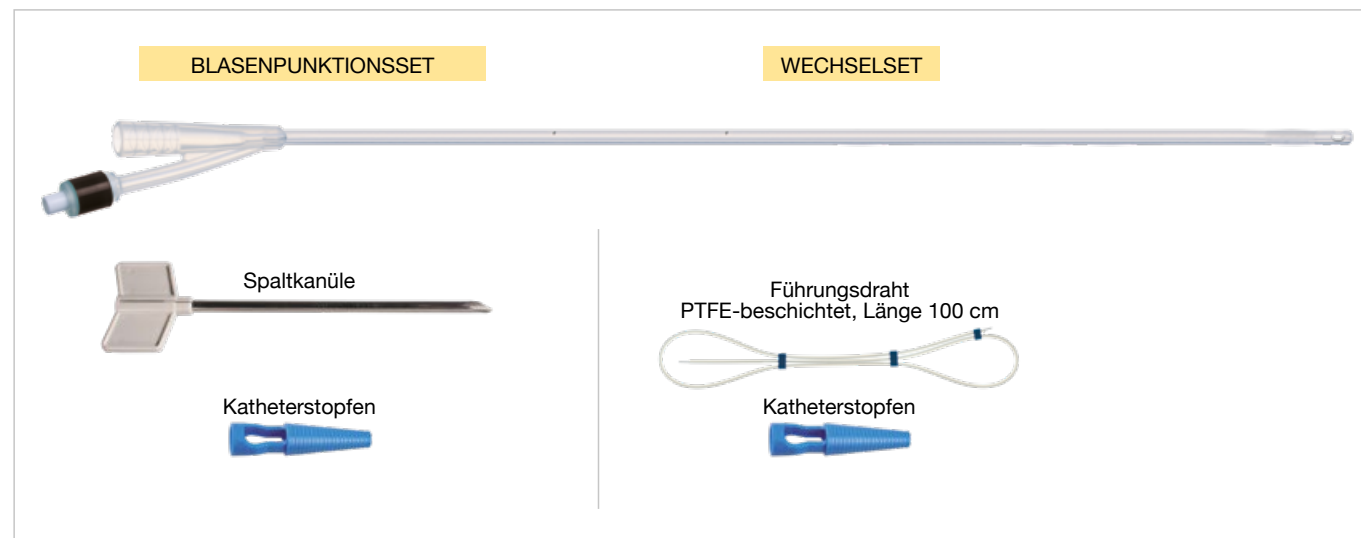

**Suprapubischer Katheter**

- ◆ 100 % Silikonkatheter mit integriertem Ballon
- ◆ Zentral offene Spitze
- ◆ Transparent mit integriertem Röntgenkontraststreifen
- ◆ Abgerundete Spitze zur atraumatischen Einlage des Katheters
- ◆ Verstärkter Trichteransatz für sicheres Konnektieren des Urinbeutels
- ◆ Ausgezeichnete Durchflussrate

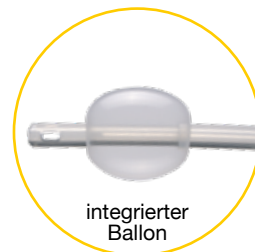

**VISIOSLIDE-Spezialbeschichtung**

- ◆ Erhöhte Gleiteigenschaften durch Spezialbeschichtung
- ◆ Innen und außen abriebfest
- ◆ Sehr geringe Inkrustationsneigung



SUPRAPUBISCHE BLASENDRAINAGE

Initial-Blasenpunktionsset mit VISIOSLIDE-Spezialbeschichtung						Verpackungseinheit = 5 Stück	
Bestellnummer mit Skalpell mit VISIOSLIDE	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	passend für Draht ø (inch)	Spaltkanüle Größe ø (mm)	Spaltkanüle Länge (cm)	
SV-300835-SC	8	35	1,5	0,028"	3,6	8	
SV-301040-SC	10	40	3	0,032"	4,6	12	

Wechselset					Verpackungseinheit = 5 Stück	
Bestellnummer mit VISIOSLIDE	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	passend für Draht ø (inch)		
SV-330835-SC	8	35	1,5	0,028"		
SV-331040-SC	10	40	3	0,032"		

Katheter einzeln					Verpackungseinheit = 10 Stück	
Bestellnummer normale Variante mit VISIOSLIDE	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	passend für Draht ø (inch)		
SV-310835-SC	8	35	1,5	0,028"		
SV-311040-SC	10	40	3	0,032"		

Blockungsspritze				VE = 200 Stück	
Bestellnummer	Kapazität (ml)	PZN	Hilfsmittel-Nr.		
SP-2100-10	10	03049455	15.99.99.0006		


- ◆ Aqua-Dest.-Glycerin-Gemisch 10 %



## TRANSURETHRALE BALLONKATHETER

**2-WEGE BALLONKATHETER**

Standard und Supersoft, mit aufgeklebtem Ballon

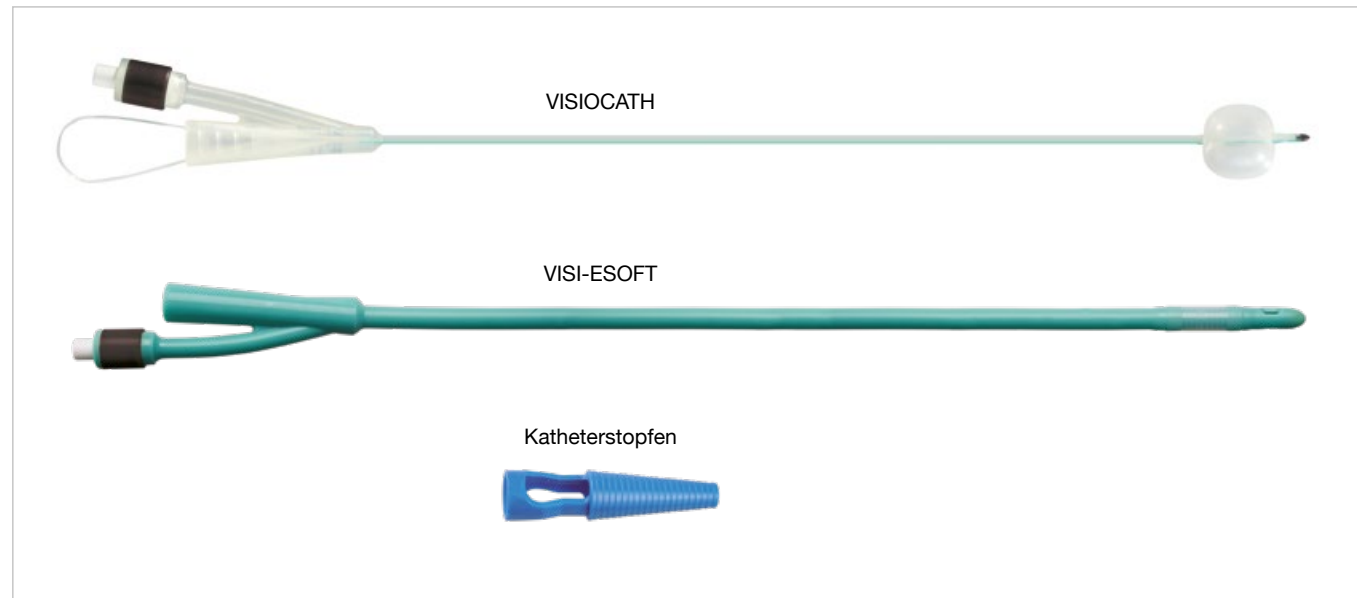**BESCHREIBUNG**

**VISIOCATH 2-Wege Ballonkatheter**

- ◆ 100 % Silikon für optimalen Patientenkomfort
- ◆ Gute Drainageleistung durch großen Innendurchmesser
- ◆ Sehr glatte Oberfläche für angenehmes Hautgefühl
- ◆ Mit innenliegendem Kunststoffmandrin
- ◆ Sehr gute Gleiteigenschaften, innen und außen abriebfest
- ◆ Abriebfeste Beschichtung innen und außen
- ◆ Geringe Inkrustationsneigung

 Mit  
 spezieller  
**VISIOSLIDE**  
 Beschichtung

**VISI-ESOFT 2-Wege Ballonkatheter**

- ◆ 100% Silikon für optimalen Patientenkomfort
- ◆ Besonders weicher Ballonkatheter für verbesserten Tragekomfort
- ◆ Gute Drainageleistung durch großen Innendurchmesser
- ◆ Verstärkter Trichteransatz für sicheres Konnektieren des Urinbeutels

## TRANSURETHRALE BALLONKATHETER

**VISIOCATH 2-Wege Ballonkatheter**

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KW-450603-SC	6	30	1,5
KW-450803-SC	8	30	5
KW-451003-SC	10	30	5

**VISI-ESOFT 2-Wege Ballonkatheter**

Verpackungseinheit = 10 Stück

Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KG-300810	8	30	3
KG-301010	10	30	5

**Blockungsspritze**

VE = 200 Stück

Bestellnummer	Kapazität (ml)	PZN	Hilfsmittel-Nr.
SP-2100-10	10	03049455	15.99.99.0006

- ◆ Aqua-Dest.-Glycerin-Gemisch 10 %






SPEZIALPRODUKTE

**PYELOPLASTIK-KATHETER**

Zur Nierenbeckenplastik

SET-KOMPONENTEN

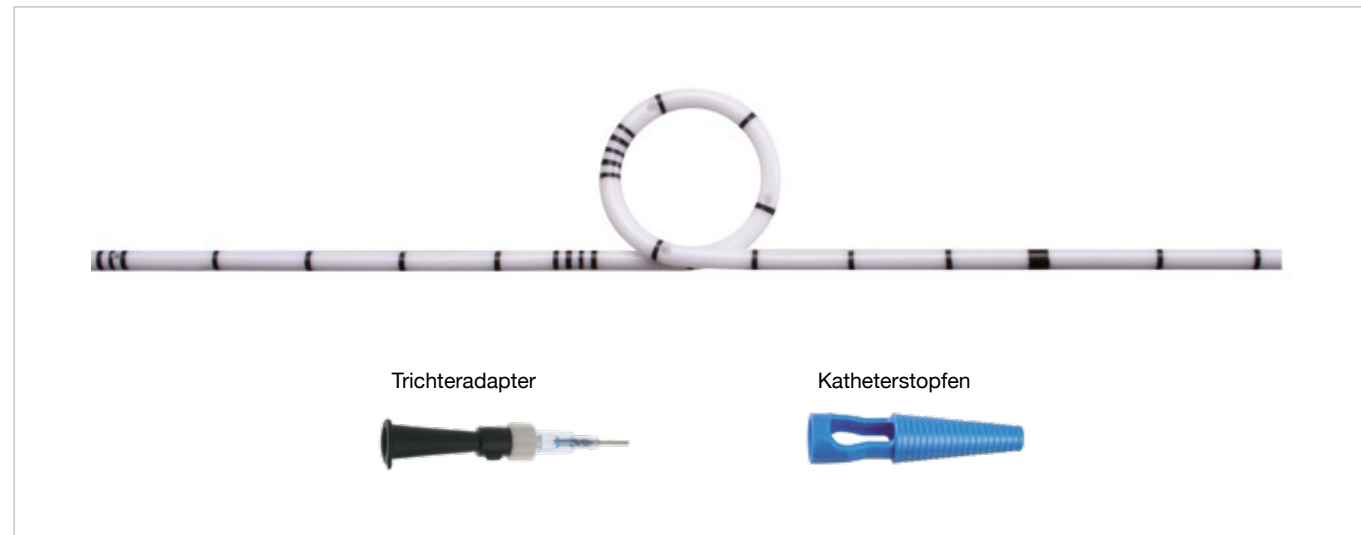

**Pyeloplastik-Katheter**

- ◆ Polyurethan (PUR)
- ◆ Drainageöffnungen im Pigtail und im Ureter liegenden Anteil
- ◆ Markierungen zur exakten Positionierung
- ◆ Röntgensichtbar

**Nadeladapter mit Trichter**

- ◆ Zum Anschluss eines Urinbeutels

Bestellnummer	Größe (FR/CH)	Ureter-/Ableitungsteil (cm)	Maximaler Führungsdraht Ø	Pigtaildurchmesser (mm)
EK-620528	4,7	6 / 20	0,028"	15
EK-620628	6	6 / 20	0,035"	15
UR-910435	4	7 / 21	0,025"	15
UR-910535	5	7 / 21	0,028"	15


Verpackungseinheit = 10 Stück

SPEZIALPRODUKTE

**LINZER-KATHETER**

Hypospadie und Epispadie

SET-KOMPONENTEN

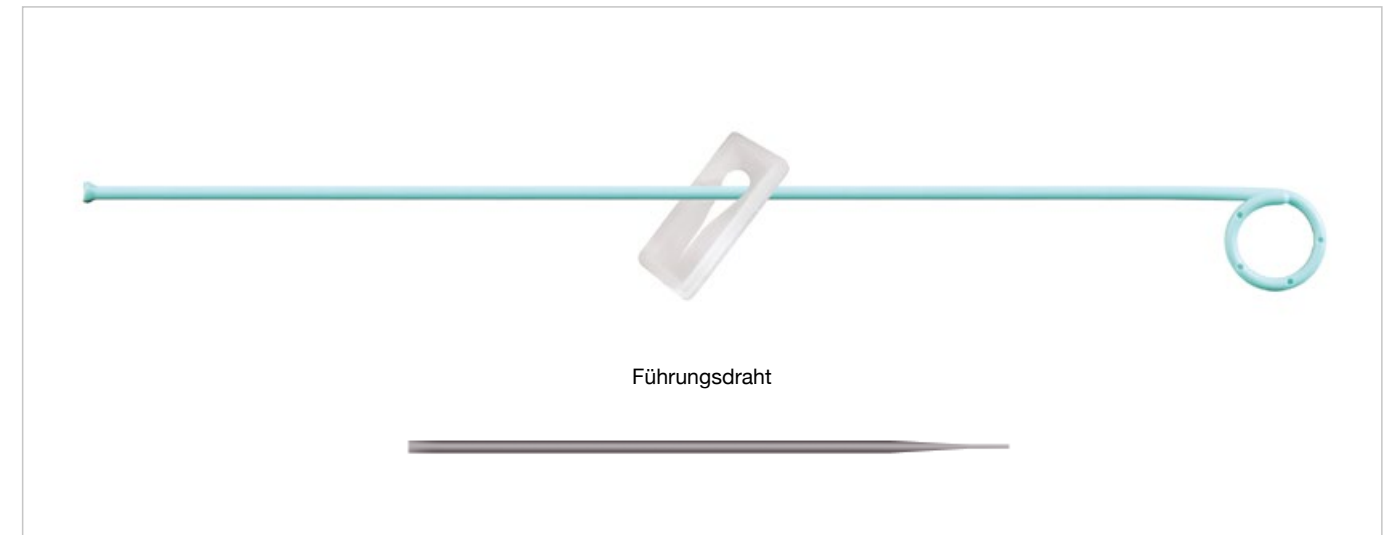

**Linzer-Katheter**

- ◆ Weiches Polyurethan (PUR) für besten Patientenkomfort
- ◆ Schienung der Urethra nach operativen Eingriffen bei Hypospadie und Epispadie
- ◆ Sicherstellung von postoperativer Blasendrainage
- ◆ Stabilisiert die Urethra, ohne Naht

**Führungsdraht**

- ◆ PTFE-beschicht

Geschlossene Spitze							Verpackungseinheit = 10 Stück
Bestellnummer	Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser	Drahtspitze	Draht-Härtegrad	
EG-350822	8	22	40	0,038"	gerade	hart	

# BESTELL-INFORMATIONEN

## Bestellung per Fax



+49 8032 973-211

## Bestellung per Telefon



+49 8032 973-210

## Bestellung per E-Mail



[info@urotech.com](mailto:info@urotech.com)

**UROVISION GmbH**  
**UROTECH GmbH**  
Medi-Globe-Str. 1-5  
D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle

Telefon: +49 (0) 8032 - 973-210

Fax: +49 (0) 8032 - 973-211

E-Mail: [info@urotech.com](mailto:info@urotech.com)

[www.urovision-urotech.de](http://www.urovision-urotech.de)